



PROTECT AGAINST FRICTION

リスクン

ベルギー生まれのスキンケアパッチ ReSkin (リスクン) は1984年創業のサイクリングウェア製造メーカー「BIORACER社」によって開発されました。高機能なサイクリングウェアの開発を続ける中で、パッドだけでは解決できない皮膚へのダメージを決定的に減らすReSkinが生み出されました。

ReSkin® 痛みからの解放

乗車時にサイクリングシューズとの擦れによる痛みはサイクリストにとって共通の悩みです。これはプロ選手にも初心者にも共通して起こる現象で、パフォーマンスに深刻な影響を与えます。ReSkin®はBio-Racer社が開発した画期的な商品で、サドル部分で生じる摩擦による痛みを防止して解決に導きます。

ミシン目のあるLycra®とシリコンコーティングが融合することで、Re-Skinはまるで人工皮膚のような役割をすると言えます。さらにBi-Elasticityという二方向に伸びる素材を使用する事でまるで何もつけていないかのような、肌に優しくクオリティの高い商品となっています。

通気性がよく、肌に優しく、はがす際に痛みはありません。特殊に開発された粘着面は毛を抜いてしまうことはほとんどありませんが、毛深い場合には粘着性が落ちますので、ご使用前には装着する場所の毛を剃ることをお勧めします。

表面に使用されている特殊な粘着物はISO 10993-規格に適合しています。また、細胞障害性・皮膚感受性・内反応のテストをクリアしています。


洗濯、再使用に関して:ご使用状況にもよりますが、ReSkin®は3~5回にわたり使用することが出来ます。運動後にシャワーを浴びる際、タイルやその他の滑らかな場所にReSkin®を貼り付けてください。シャワーを使って、ぬるま湯ですすぎ洗いを行なってください。石鹸を使う場合はマイルドソープをご使用ください。きれいになりましたら乾燥させます。乾燥した後、再び使用することができます。(洗ったほうが粘着性が回復します)

ReSkin® Bike Patch

リスクン バイクパッチ for サイクリング


バイクパッチ使用方法

- 1: 裏紙を粘着力のある面から剥がします。女性の場合はまずハサミで裏紙の点線に沿って切ります。
- 2: 粘着力のある面を上にし、指先に乗せます。
- 3: 会陰の下にReSkin®をもっていけます(会陰とは生殖器と肛門の間にある皮膚です)。女性の場合、縦にして横にしてもお好みでご使用できます。
- 4: 会陰に貼り付けます。
- 5: 残りの部分を擦って足の内側にしっかりと貼付けます。女性がご使用される場合は快適にお使いいただくために点線に沿ってReSkin®を切ってください。

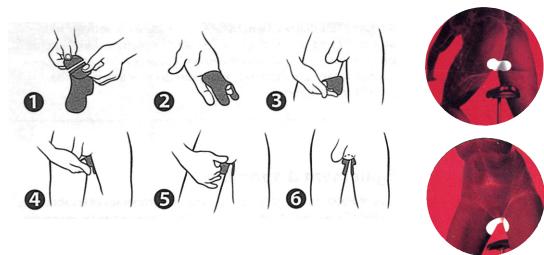

パッド

リスクン バイクパッチ 1枚

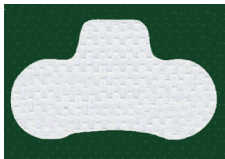

発注番号 140001

¥525 (本体¥500)

お買得なお試し用単品販売
(梱包、取扱説明書なしでパッチが1枚だけ入っています。)

パッド

リスクン バイクパッチ 3枚セット



発注番号 140013

¥2,835 (本体¥2,700)

ハードケース、
取扱説明書付き。

パッド

リスクン バイクパッチ 5枚セット



発注番号 140015

¥4,200 (本体¥4,000)


ハードケース、
取扱説明書付き。

ReSkin® Allround Patch

リスクン オールラウンドパッチ for オールスポーツ


まめや摩擦による傷から肌を守ります。

サイクリスト用のReSkin®に加えて、Bio-Racer社は体中どこでも摩擦に悩まされる部分に使用できる商品も開発いたしました。それが「オールラウンドパッチ」です。代表的な例として足のまめ、衣服による擦れを防止することができます。ReSkin®を付けることで、スキー、アイススケート、ランニング、乗馬、モトクロス、クロスカントリー、ウォーキングなどのスポーツが摩擦による不快感を気にすることなく快適に楽しめます。サイクリング時に使用する場合は縦方向に2つに切って使用して下さい。(女性向き)

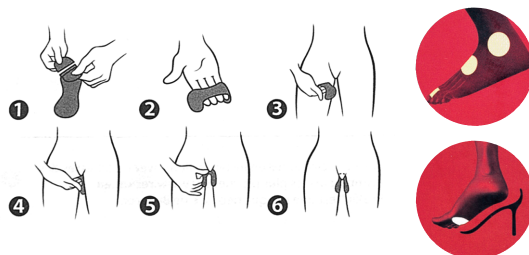

パッド

リスクン
オールラウンドパッチ 1枚

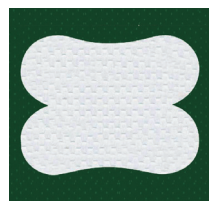

発注番号 140008

¥787 (本体¥750)

サイズ: 145×112mm

お買得なお試し用単品販売

(梱包、取扱説明書なしでパッチが1枚だけ入っています。)

パッド

リスクン
ヒールパッチ 4pcs



発注番号 140017

¥693 (本体¥660)

ビニールバック

サイズ: 85×47mm

●サイクリングシューズを使用する時のかかとや甲、親指などあらゆる場所の靴ずれを防止。

